


Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 11:10

Link do produktu: <https://hyoxy.pl/lampa-led-rdpro750-fs7-p-35.html>

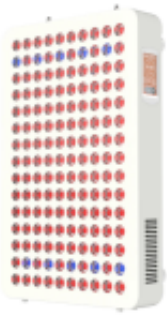

## Lampa LED RDPRO750-FS7

Cena brutto	<b>3 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 844,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RED_RDPRO750FS7</b>
Kod EAN	<b>5905629887375</b>
Długości fal	<b>480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm</b>
Liczba diod LED	<b>150 (Dual Chip)</b>
Waga	<b>5,70 kg</b>
Sterowanie	<b>Ekran dotykowy, zdalne sterowanie, aplikacja</b>
Tryb SMART	<b>Tak (11 trybów)</b>
Wymiary	<b>47,3 x 30 x 6,5 cm</b>
Irradiancja	<b>114 mW/cm<sup>2</sup></b>

### Opis produktu




PEŁNA GWARANCJA · SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI · NAJLEPSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA · CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

---

# RDPRO750-FS7 - profesjonalna terapia światłem LED

## KLUCZOWE ZALETY MODELU

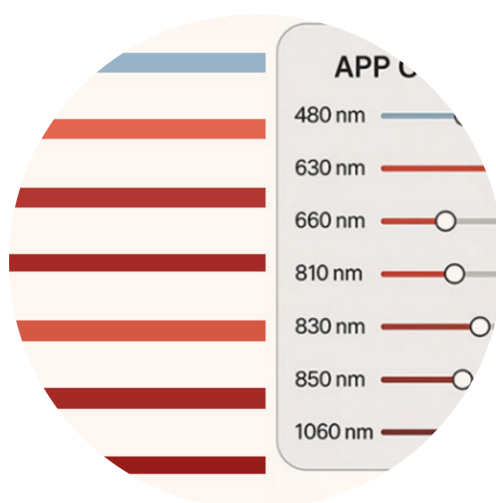

### 7 długości fal

szerokie spektrum od 480 nm (dla skóry)  
do 1060 nm (dla tkanek głębokich).




### Ekran dotykowy

oraz pilot w zestawie dla łatwego sterowania.




### Sterowania aplikacją

Precyzyjna kontrola czasu, intensywności i częstotliwości sesji za pomocą smartfona.

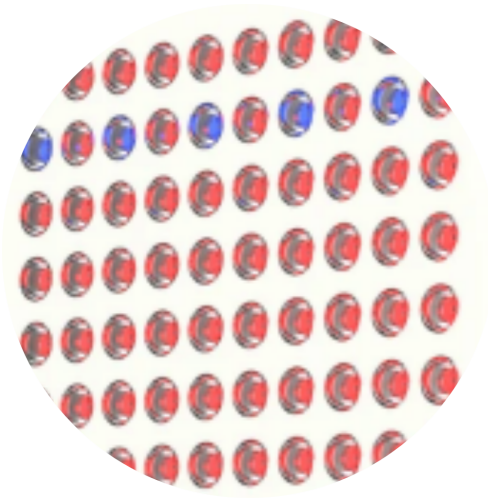

#### **Otwarta konstrukcja**

Brak szklanej osłony pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii.

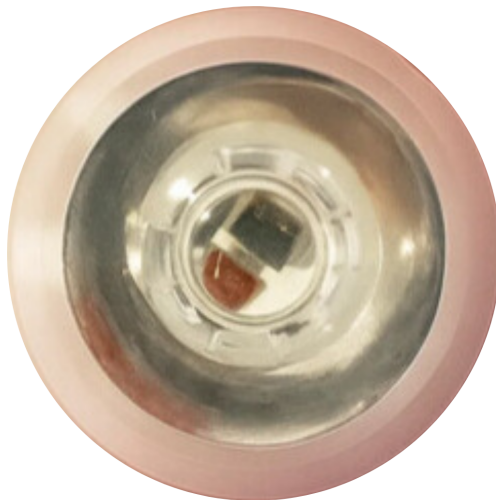

#### **Technologia Dual Chip**

dwie fale światła z jednej diody dla  
równomiernej terapii.



### Serwis i gwarancja w Polsce

3 lata gwarancji oraz szybki,  
łatwy serwis realizowany lokalnie.

## Światło, które naprawdę działa - profesjonalna terapia LED w uniwersalnym formacie

Poznaj **RDPRO750-FS7** - zaawansowany panel do terapii światłem LED, który przenosi technologię klasy klinicznej do domu lub gabinetu. To model stworzony dla użytkowników, którzy oczekują **maksymalnej skuteczności, pełnej kontroli i potwierzonego bezpieczeństwa**.

Panel wykorzystuje **pełne spektrum 7 długości fal (480-1060 nm)** - od **480 nm (dla skóry)** po **1060 nm (dla tkanek głębokich)** - oraz **Technologię Dual Chip (dwie fale światła z jednej diody)**, zapewniając precyzyjne i równomierne działanie na skórę, mięśnie oraz głębsze tkanki. **Otwarta konstrukcja (brak szklanej osłony)** pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii





**RDPRO750-FS7 oferuje maksymalne natężenie promieniowania 114 mW/cm<sup>2</sup> w odległości 15 cm**, co umożliwia skuteczną terapię regeneracyjną oraz wsparcie kondycji skóry i ogólnego samopoczucia. Urządzenie posiada **ekran dotykowy**, a w zestawie znajduje się **pilot** dla łatwego sterowania. Dodatkowo **sterowanie aplikacją** zapewnia precyzyjną kontrolę **czasu, intensywności i częstotliwości** sesji za pomocą smartfona - dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Uniwersalny, średni format panelu sprawia, że urządzenie świetnie sprawdza się w terapii **całego ciała**, zachowując wygodę użytkowania i elastyczność zastosowań. **Pełna kompatybilność ze stojakami** umożliwia dostosowanie do swoich potrzeb.

Całość dopełniają **certyfikacje FDA, FCC, CE i RoHS** oraz **serwis i gwarancja w Polsce: 3 lata gwarancji i szybki, łatwy serwis realizowany lokalnie**. **RDPRO750-FS7** to jedno urządzenie - wiele możliwości. Profesjonalna technologia, pełne spektrum światła i kontrola, której możesz zaufać.

**Nasza lampa jest w pełni kompatybilna z dedykowanymi stojakami z naszej oferty**



### Stojak podłogowy FS-RDPRO

Idealny wybór, jeśli szukasz **lekkość i uniwersalność**. Stojak jest wyjątkowo mobilny i łatwy do przenoszenia, a jego solidna podstawa gwarantuje pełne bezpieczeństwo przed przypadkowym przewróceniem. Pozwala na swobodną regulację kąta nachylenia, dzięki czemu precyzyjnie dopasujesz odległość lampy od ciała, zapewniając sobie skuteczną i wygodną terapię w każdym miejscu.



### Stojak pneumatyczny PS-RDPRO

To rozwiązanie dla osób stawiających na **maksymalny komfort i elegancję**. Dzięki wbudowanemu siłownikowi zmiana wysokości odbywa się niemal bez użycia siły - płynnie, cicho i bez skoków. Jest to wyjątkowo stabilna i trwała konstrukcja, która pozwala na błyskawiczne ustawienie lampy w pionie lub poziomie, co idealnie sprawdza się w profesjonalnych gabinetach i salonach wellness.

[Sprawdź stojaki z naszej oferty](#)





## Aż 7 długości fali

Od niebieskiego światła po zaawansowaną podczerwień - możesz dopasować terapię do swoich potrzeb: od oczyszczenia i ukojenia skóry, po stymulację kolagenu i głęboką regenerację tkanek.

Każde pasmo ustawisz niezależnie (0-100%), tworząc spersonalizowane sesje fototerapii:

- **480 nm (niebieskie)** - działanie antybakteryjne, wsparcie oczyszczania skóry.
- **630-660 nm (czerwone)** - stymulacja kolagenu, poprawa jędrności i elastyczności.
- **810-850 nm (NIR)** - wsparcie mikrokążeń, regeneracja mięśni i stawów (lampa na podczerwień).
- **1060 nm (głęboka podczerwień)** - najgłębsza penetracja, pobudzenie mitochondriów i procesów naprawczych.

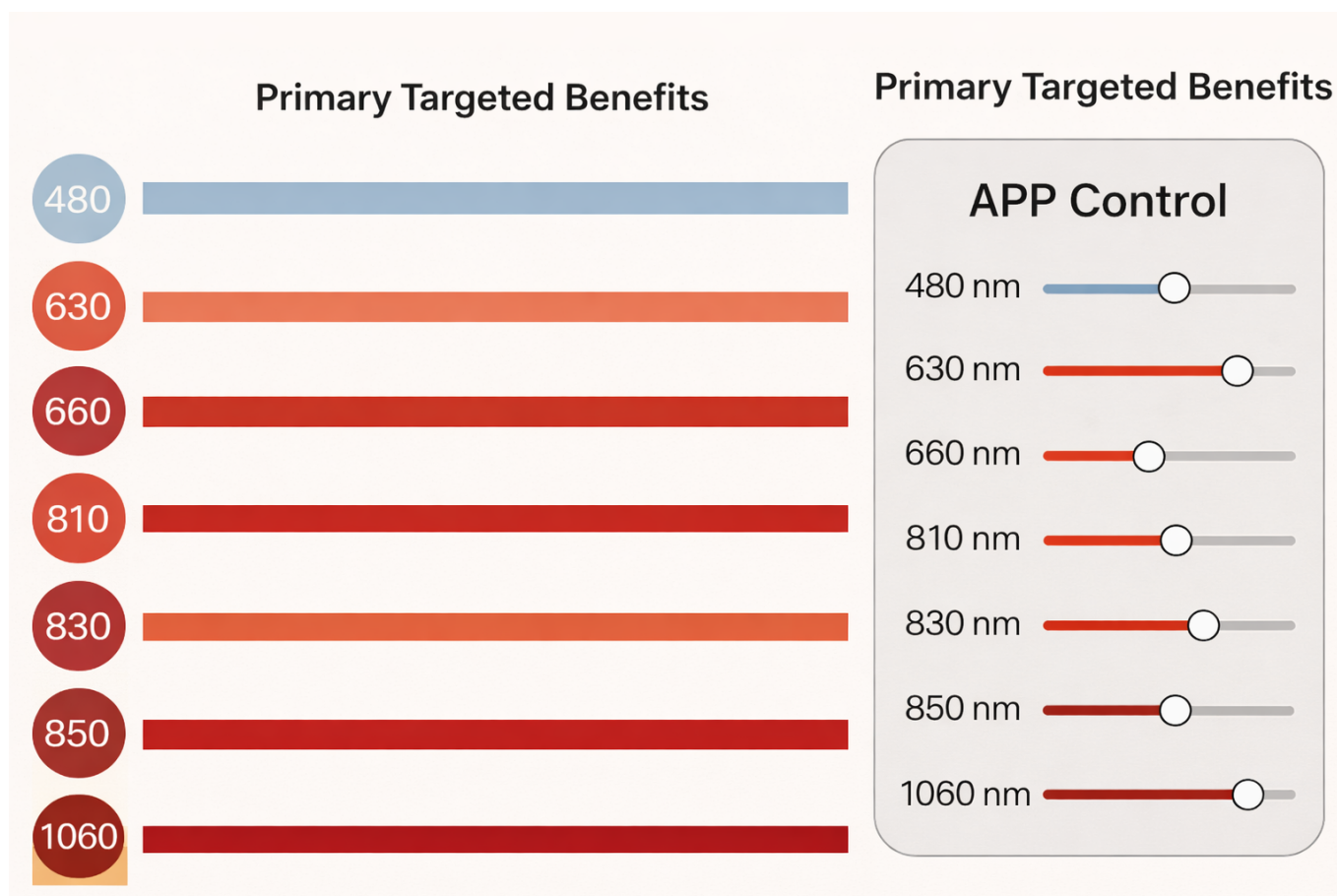

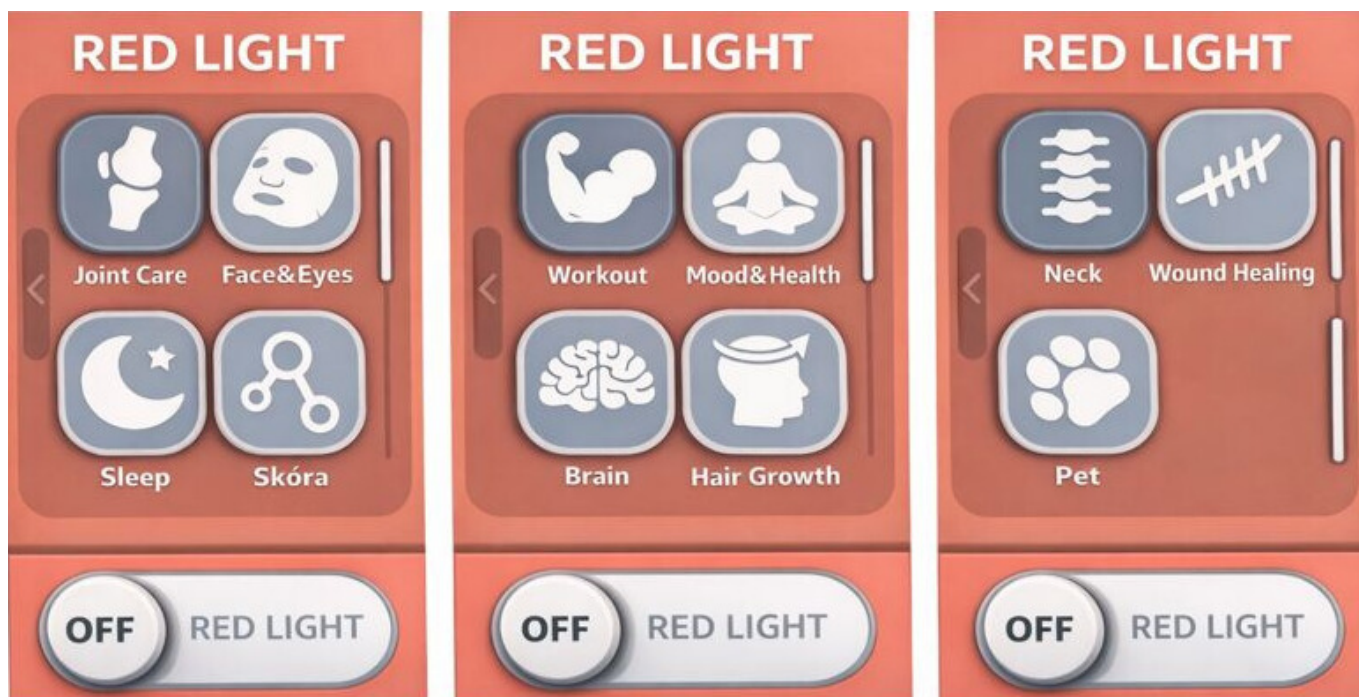

### Inteligentny Tryb smart

Możliwość pracy przy użyciu inteligentnego trybu smart. Każdy tryb to odpowiednio dostosowane parametry do potrzeb klienta. Wybierz z spośród 11 gotowych programów: Regeneracja stawów, Twarz i oczy, Sen, Skóra, Trening, Zdrowie psychiczne, Mózg, Wzrost włosów, Szyja, Leczenie ran oraz program dla zwierząt.


### Tryb Własny

Istnieje możliwość dostosowania wszystkich parametrów do swoich preferencji.


**Dimming** - jasność, regulowanie 3 grup diod (niebieskich, czerwonych i podczerwonych), przeciągając suwak w górę lub dół.

**Timer** - czas, który umożliwia ustawienie długości trwania zabiegu.

**Pulse** - pulsacja fal bliskiej podczerwieni, można ustalić częstotliwość pulsu 0-9999Hz.

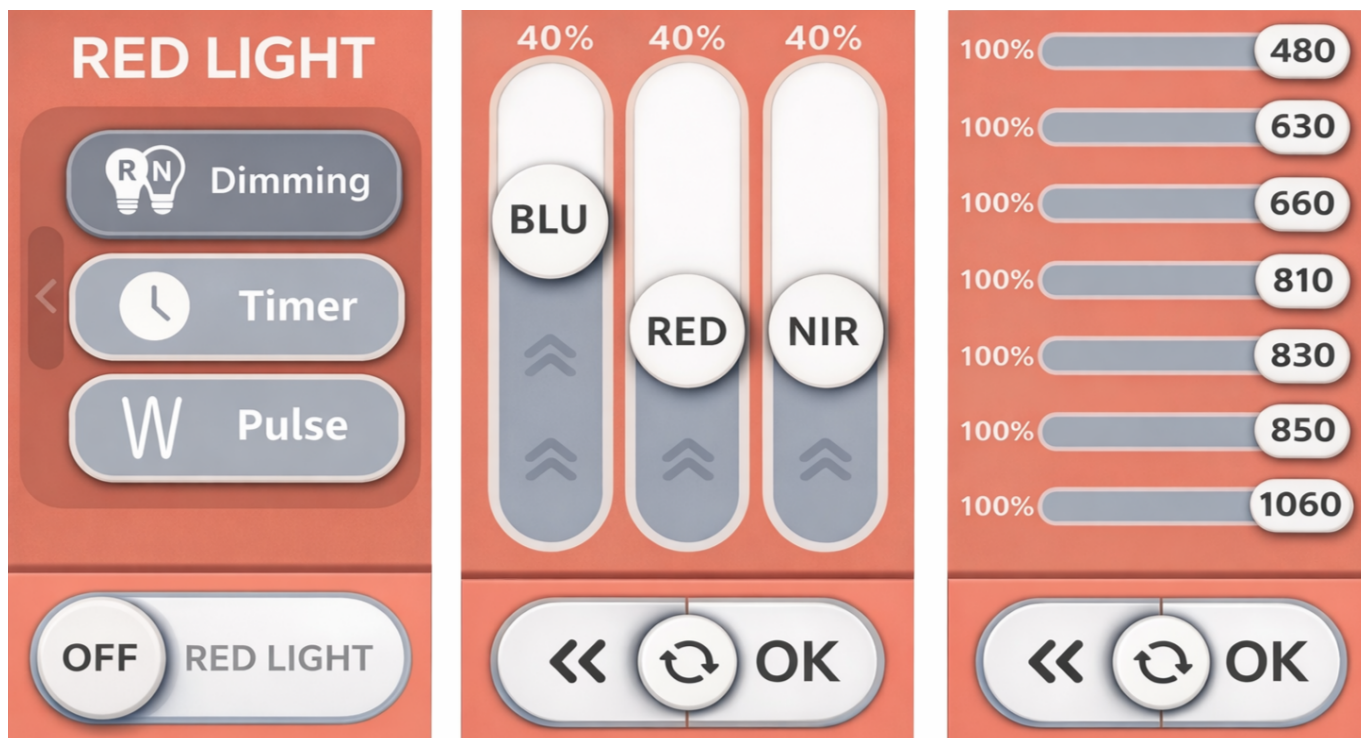

**Jaki obszar obejmuje światło panelu?**

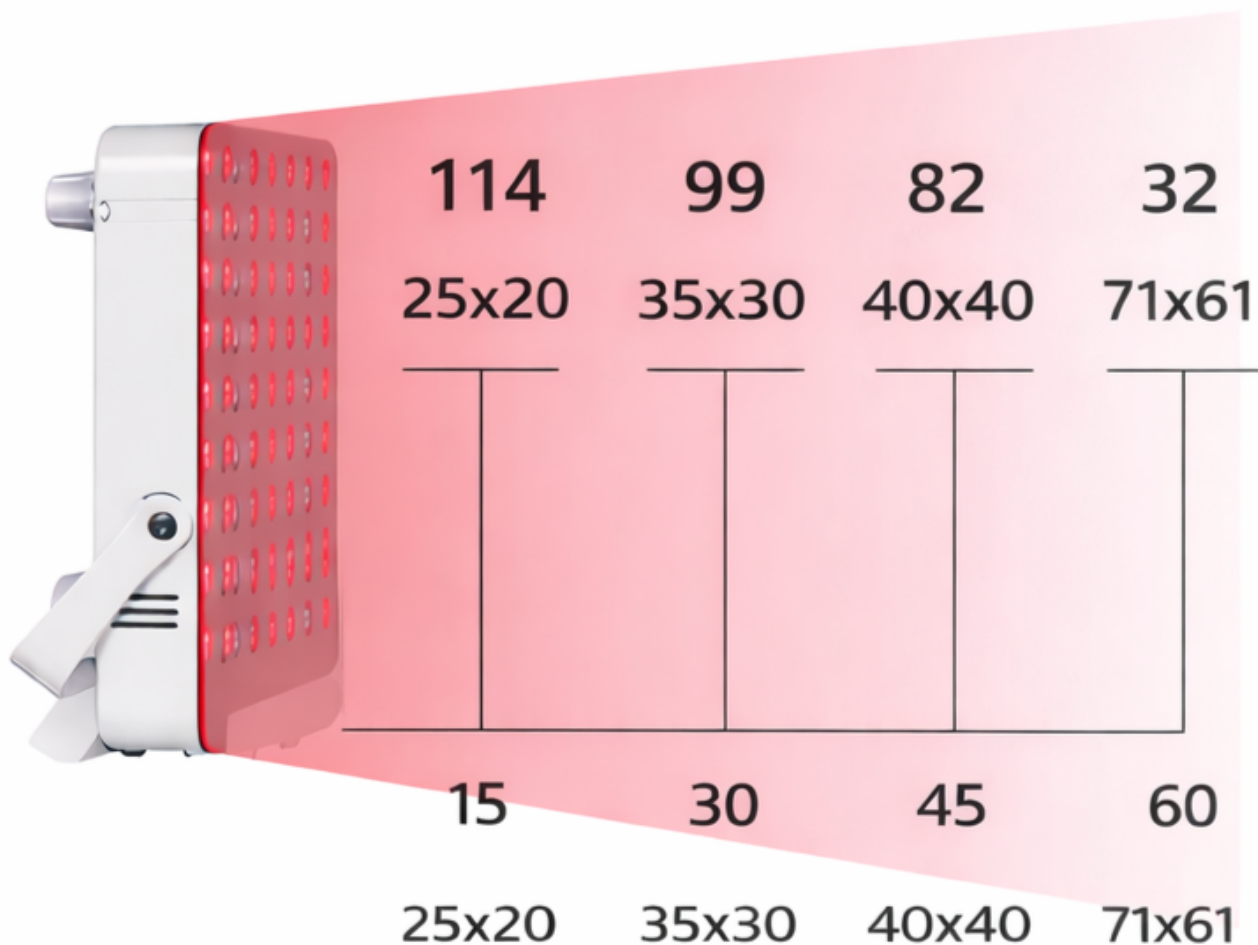


**MOC ŚWIATŁA, KTÓRA DZIAŁA** - 118 mW/cm<sup>2</sup> precyzyjnie tam, gdzie potrzebujesz

Panel RDPRO750-FS7 zapewnia **imponujące natężenie światła na poziomie 114 mW/cm<sup>2</sup> w odległości 15 cm**, dostarczając skórze i tkankom energii dokładnie tam, gdzie jest najbardziej efektywna.




To idealna równowaga między głęboką penetracją światła a komfortem użytkownika - dzięki czemu każda sesja staje się maksymalnie skuteczna.

Panel **RDPRO750-FS7** został zaprojektowany do **wszelstronnej terapii w uniwersalnym, średnim**

**formacie**, łącząc wygodę użytkowania z wysoką skutecznością. Urządzenie zapewnia **równomierne naświetlanie większych obszarów ciała**, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w pracy nad **dużymi partiami** (np. plecy, brzuch, uda), jak i w terapii **wybranych stref** (np. bark, kolano, biodro). To idealny wybór, gdy zależy Ci na **efektywnej terapii całego ciała** lub **elastycznym zastosowaniu** w domu i gabinecie - dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

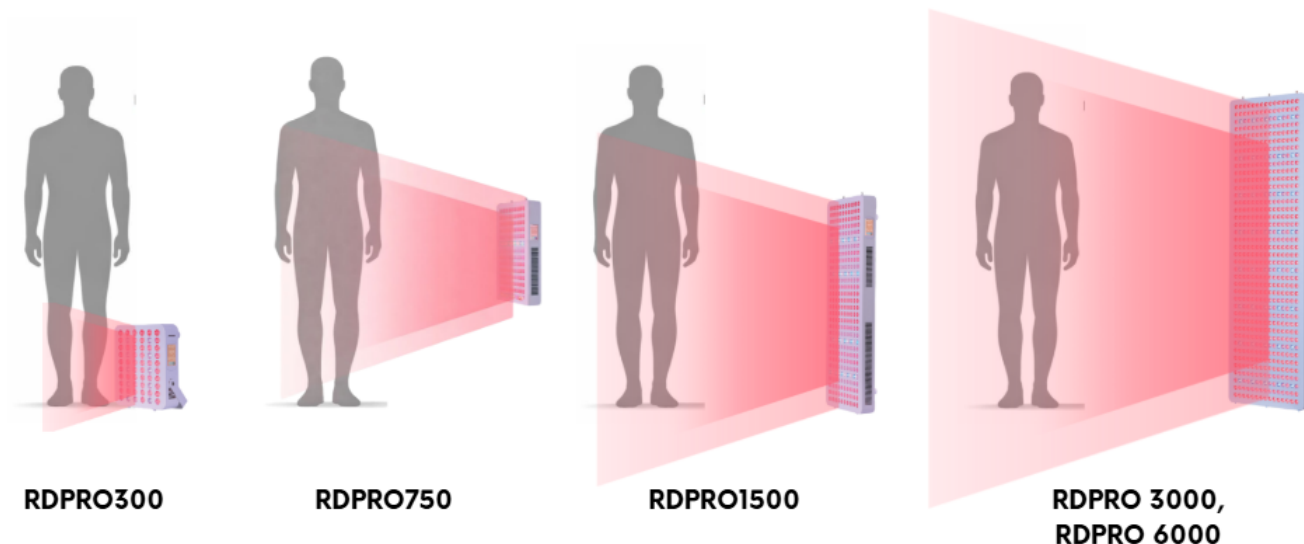



Komu dedykowana jest terapia światłem LED?

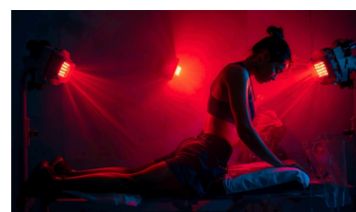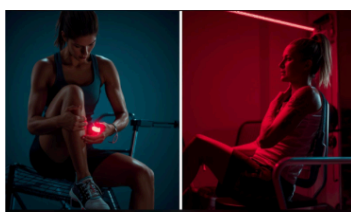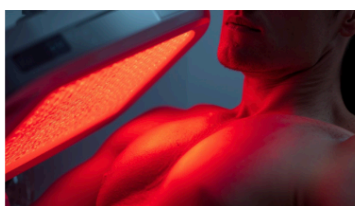

---


### **Sportowcy**

Dedykowane osobom prowadzącym aktywny tryb życia i uprawiającym sport. Produkty w tej kategorii wspierają regenerację po wysiłku, pomagają rozluźnić przeciążone mięśnie oraz zapewniają komfort w przypadku urazów stawów, naciągnięć mięśni i więzadeł. Idealne rozwiązanie po treningu, zawodach lub intensywnej aktywności.

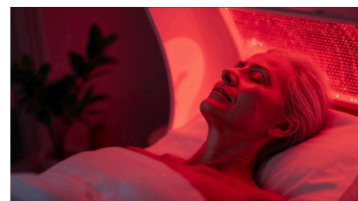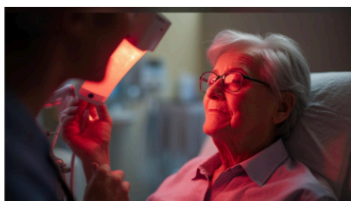

### **Seniorzy**

Rozwiązania stworzone z myślą o seniorach, którzy często zmagają się z bólem stawów, sztywnością mięśni oraz osłabieniem kości. Produkty z tej kategorii pomagają poprawić codzienny komfort, wspierają mobilność oraz łagodzą dolegliwości wynikające z naturalnych procesów starzenia się organizmu.

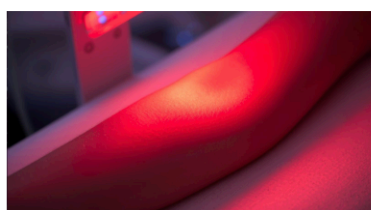

### **Osoby z chorobami reumatycznymi**

Kategoria przeznaczona dla osób cierpiących na reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów oraz chorobę zwyrodnieniową. Produkty wspierają redukcję bólu, sztywności oraz dyskomfortu w obrębie stawów i kręgosłupa, pomagając w codziennym funkcjonowaniu i poprawie jakości życia.



(15 cm)	
Irradiancja	
Długość fal	
Wymiary	
Waga	
Gwarancja	

## Specyfikacja techniczna

Model

**RDPRO750-FS7**

Liczba diod LED

150 (Dual Chip)

Długości fal

480 / 630 / 660 / 810 / 830 / 850 / 1060 nm

Tryb inteligentny (Smart Mode)

Tak

Napięcie / zasilanie

AC 100–240 V

Pobór mocy

219 W

Kąt świecenia

30°

Wymiary

47,3x30x6,6

Waga

5,7 kg

---

Natężenie promieniowania

114 mW/cm<sup>2</sup> (z odległości 15 cm)

Wentylatory chłodzące

2

Żywotność LED

50 000 godzin

Emisja EMF

Znikoma

Gwarancja

3 lata

Timer

1–30 minut

Tryb pulsacyjny (tylko NIR)

0–9999 Hz

Regulacja jasności

0%–100%

Sterowanie

Ekran dotykowy + pilot + aplikacja

Zakres temperatury pracy


10°C – 30°C

Obudowa


SPCC

Certyfikaty

FDA / FCC / CE / ROHS

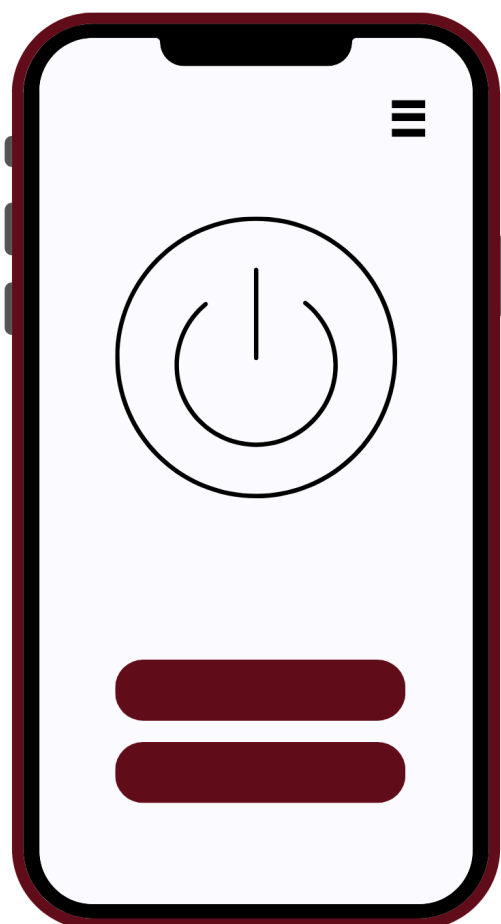

# APLIKACJA

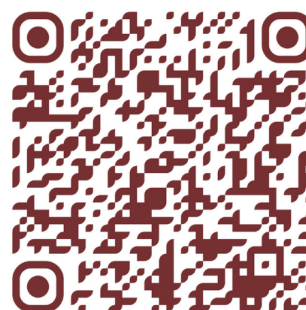

1


## Intuicyjne sterowanie za pomocą aplikacji



Zapomnij o konieczności ręcznego ustawiania parametrów urządzenia w trakcie zabiegu. Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej zyskujesz pełną kontrolę nad każdą sesją bezpośrednio ze swojego smartfona. To rozwiązanie stworzone z myślą o Twojej wygodzie - możesz dowolnie modyfikować ustawienia bez przerywania odpoczynku, mając pewność, że wszystko przebiega zgodnie z Twoimi preferencjami.

---

## Co znajduje się w zestawie?

Ten kompletny zestaw zawiera zaawansowaną **lampę terapeutyczną LED**, zaprojektowaną do skutecznej terapii światłem w domowym zaciszu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody użytkowania, w pakiecie znajduje się dedykowana **ochrona oczu** oraz intuicyjny **pilot zdalnego sterowania**. Bezproblemowy montaż umożliwi dołączony **hak na drzwi**, zestaw profesjonalnego **sprzętu do zawieszenia** oraz niezbędny **uniwersalnym zespół kabli i zatrzasków**. Całość dopełnia **kabel zasilający** oraz **uniwersalnymkabel krosowy**, pozwalający na łatwe podłączenie i ewentualną rozbudowę systemu.

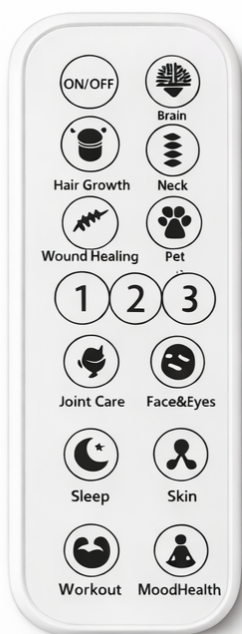

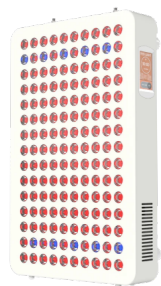Funkcje i cechy		 RDPRO750-FS7	 inni producenci
Siedem skutecznych długości fal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wielofalowa technologia LED z podwójnym chipem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Technologia pulsacyjna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intuicyjny ekran dotykowy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aplikacja mobilna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Europejski certyfikat jakości CE oraz FDA, FCC i ROHS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tryb smart	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3-letnia gwarancja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Porównanie kluczowych funkcji – sprawdź różnice przed zakupem.

## FAQ

**Czy mogę wykonywać terapię światłem czerwonym kilka razy dziennie?**

Tak, ale ogranicz ekspozycję tej samej okolicy do 30 minut dziennie, podzielonych na 2-3 sesje. Żadna sesja nie powinna przekraczać 20 minut na danym obszarze.

**Jak często należy stosować terapię światłem czerwonym?**

Codziennie, aby zmaksymalizować korzyści. Zajmuje to tylko kilka minut. Jeśli codzienne stosowanie nie jest możliwe, dąż do przynajmniej 3 sesji w tygodniu.

**Kiedy zazwyczaj stosuje się terapię światłem czerwonym?**

W dowolnym czasie dnia, kiedy potrzebujesz zastrzyku energii. Ponieważ terapia trwa tylko do 20 minut, łatwo wpasować ją w swój harmonogram. Pomaga to:

- Rano, aby pobudzić organizm i pozostać czujnym przez cały dzień,
- Przed treningiem, aby przygotować mięśnie dzięki poprawionej cyrkulacji,
- Po treningu, aby przyspieszyć regenerację i zmniejszyć bóle mięśniowe.

**Jaka jest zalecana odległość i czas trwania sesji terapii?**

Zalecamy odległość od 15 do 50 cm przez 10 do 20 minut na obszarze docelowym. Dłuższe sesje tracą skuteczność, ponieważ komórki przestają wchłaniać światło po 20 minutach. Im dalej się znajdujesz, tym dłuższa powinna być sesja, ponieważ intensywność zmniejsza się z odległością. Dokładne liczby mogą się różnić; słuchaj swojego ciała, aby znaleźć najlepsze ustawienia.

**Czy konieczne jest noszenie ochronnych okularów podczas terapii?**

Chociaż zalecamy noszenie ochronnych okularów, większość naszych klientów po prostu zamyka oczy podczas terapii. Jeśli masz wrażliwe oczy lub światło cię

---

niepokoi, radzimy je założyć. Dla pełnego spokoju skonsultuj się z lekarzem.

**Jaka jest różnica między czerwonym światłem a światłem bliskiej podczerwieni (NIR)?**

Długości fal czerwonego światła przede wszystkim wpływają na skórę, włosy i paznokcie, poprawiając ich jakość i wygląd.

Światło bliskiej podczerwieni penetruje głębiej w mięśnie, kości, stawy i narządy.

Oba spektra wspomagają regenerację, zmniejszają stany zapalne i zwiększają energię komórkową, ale działają na różnych poziomach.

**Czy spektra czerwonego światła i bliskiej podczerwieni (NIR) są używane razem czy osobno?**

Najczęściej stosowane razem, ponieważ się wzajemnie uzupełniają. Można je jednak również stosować osobno.

Na przykład, wieczorem idealnie jest używać niewidocznego spektrum NIR, które nie nadmiernie stymuluje ciało, a raczej wspomaga produkcję hormonów snu.

Jeśli masz wrażliwość skóry na ciepło, wybierz czerwone światło (RED), które nie powoduje podgrzewania i jest łagodniejsze dla skóry.

## 5,0

□□□□□

2 opinie

Jan

□□□□□

03/12/2025

Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Używam produktu codziennie i już po krótkim czasie zauważyłem poprawę w zakresie komfortu i wyników. Konstrukcja jest solidna, a dodanie podstawy to świetna decyzja – stabilizuje cały zestaw. Jediną sugestią, którą mam, jest ulepszenie kółek, by były bardziej ciche i delikatniejsze dla podłogi, ale poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń. Produkt spełnia moje oczekiwania w pełni!

Katarzyna

□□□□□

03/12/2025

Bardzo dobry produkt, solidnie wykonany i wygodny w codziennym użytkowaniu. Na razie spełnia moje oczekiwania i sprawia wrażenie trwałego. Jestem zadowolony z zakupu.

\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa**

---

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

**Producent:** REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province,

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786,  
**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786

